


設置方法①

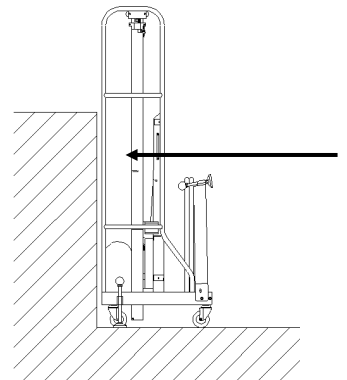


■運搬

- ①設置場所まで運搬を行います。
- ②2人以上の人数でゆっくりと押して運搬してください。


■設置位置

- ①設置位置は基本的にはステージの壁に機械の背中部分があたるぐらい寄せます。
- ②機械後部よりブリッジは140mmほど出ます。安全のためにも100mmほどステージに架かるような位置としてください。
- ③場合により床面にベニヤ板などを敷くと床面が傷つく心配がありません。

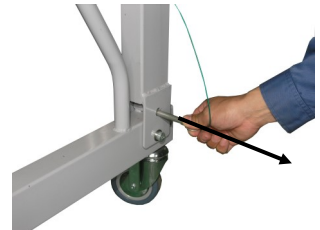

■組み立て

- ①ブリッジ側アジャスターの固定
設置場所まで運搬したら、ブリッジ側部分のアジャスターを床に当たるまでおろします。（丸いノブを右に廻す。キャスターが上がるか上がらない程度で十分です。）
- ②折りたたみ足を開く。 折りたたみ足の側面のピンを抜き下ろしてからピンを差し直して固定します。
- ③折りたたみ足のアジャスターの固定。（丸いノブを右に廻す。キャスターが数ミリ上がる程度）
- ④手すりを外します。
- ⑤根元のねじをゆるめて手すりを取り外します。（真上に引っ張ってください。）

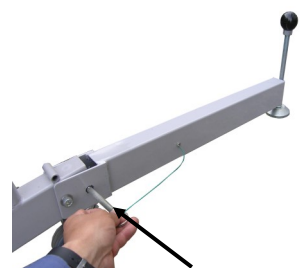

設置方法②

- ⑤ テーブルを固定しているフックを外します。
（バンド金具内部のレバーを押しバンドを緩めてフックをはずします。）



- ⑥ テーブルを開く。テーブル固定ピンを引き上げ
テーブルを倒します。

- ⑦ 手すりを取り付けます。手すりをテーブル4箇所
の穴に差し込み、ねじを締めて固定します。（安全
バンド取り付けのリングが有る方がテーブル
端に取り付けます。）



- ⑧ 手すりの安全バンドを取り付けます。


- ⑨ スイッチの取り付け。スイッチを取り付けま
す。スイッチ根元プラグをコネクタに差し込みリ
ングねじを締めます。

- ⑩ 電源コンセントにプラグを差し込みます。コード
は2mほどしかありませんので必要に応じて
延長コードをご用意ください。

- ⑪ キースッチを差し込みひねって電源ランプが点灯
することを確認する。

■運転前の確認とテスト運転

- ① 折りたたみ足が伸びていて、固定ピンが適切に
挿入されていること。

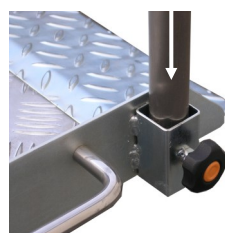

- ② 機械の4本のアジャスターで固定され、機械全
体を揺すっても機械が動かないこと。

- ③ 手すりが適正に取り付けられており固定ねじが
締まっていること。



- ④ 手すりの安全バンドが確実にフックに固定でき
ていること。

- ⑤ 操作スイッチ上下を押し必要高さまで上がり、
床面まで降りること。この際壁に接触したりし
ないこと。

- ⑥ 必要高さまで（段差に対して数センチ高い位
置）に止めてブリッジを開閉してリフトからス
テージへの乗り移りに支障がないこと。

KOIK 株式会社 コイケ

〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮2丁目21-77

TEL 0463-22-1217

使用方法①

■運転の前に

- ①設置が確実に行われているか確認する。（P8の運転前の確認を行う。）
- ②周囲尾の環境を整え周辺、利用方法に問題がないか確認する。

■使用方法

- ①車椅子をテーブルに載せ、車椅子のブレーキをかける。
- ②安全バンドをかける（より安全を高めるため手すり中央のフックにベルトをかける時はバックで侵入してください。）

▲ 注意

安全ベルトは2本以上を完全に取り付けてください。安全に行わないと落下事故の危険性があります。

- ③操作スイッチの上スイッチを押し必要な高さまで上昇させます。テーブルがステージより2～3cm上にくるようにします。（スイッチを押しているときだけ動きます。場合により上昇位置を設定することもできます。リミットスイッチの設定P12を参照。）

- ④ブリッジ開閉バーをステージ上から操作しブリッジをゆっくりと開けます。開閉バーを開く時は一度前に押して右にずらして開けてください。

- ⑤ブリッジがステージ端に10cm以上かかり、

▲ 注意

ブリッジ操作の時、手や足はさみなどのケガに注意してください。

乗り移りに問題がないか確認してください。

- ⑥車椅子のブレーキを解除しステージに乗り移ります。

■ステージからの降り方

- ①基本的には上昇と逆の手順を行います。



収納方法②

■ 収納方法

基本的には組み立てと逆の事をおこないます。

① テーブルを収納合わせマークまで上げます。

② 安全バンドをはずします。

③ 手すりをはずします。

④ テーブルおたたみます。

⑤ テーブル開閉ロックをかけます。

⑥ 収納バンドをテーブルハンドルに通しフックにかけバンドを引っ張って固定します。

▲ 注意

収納バンドの固定が不十分ですと横にして運搬する時テーブルが動き大変危険です。必ずテーブルハンドルに通し確実に固定してください。

⑦ 手すりを手すり収納部分に差込みねじを締めて固定します。

⑧ 折りたたみ足アジャスターを左に廻し、ねじを緩めます。このときアジャスターを十分に廻し折りたたみ時に出っ張らないようにします。

⑨ 折りたたみ足固定ピンを抜き足を立て固定穴にピンを刺して足を収納します。


⑩ ブリッジ側アジャスターを左に廻し5cmほど上がるようにします。（大きく上げないと運搬中段差にぶつかったり、運搬で横に倒すとき床をキズつけたりしますので注意してください。）

▲ 注意


運搬の場合は、2人以上でおこなってください。けがの危険があります。

⑪ 2人で運搬します。


⑫ 収納場所に着いたらブリッジ側のアジャスターを廻し、動かないよう固定しカバーをかけて固定してください。

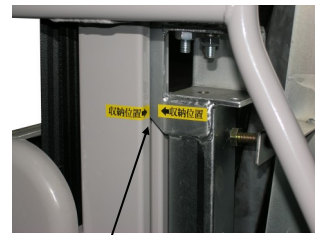

マーク

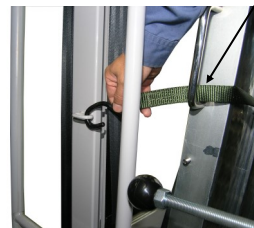

テーブルハンドルに通す

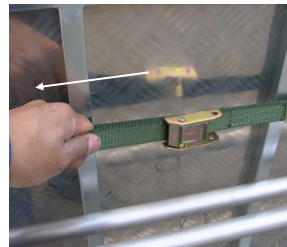

KOIK 株式会社 コイケ

〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮2丁目21-77

TEL 0463-22-1217